


Le lève personne

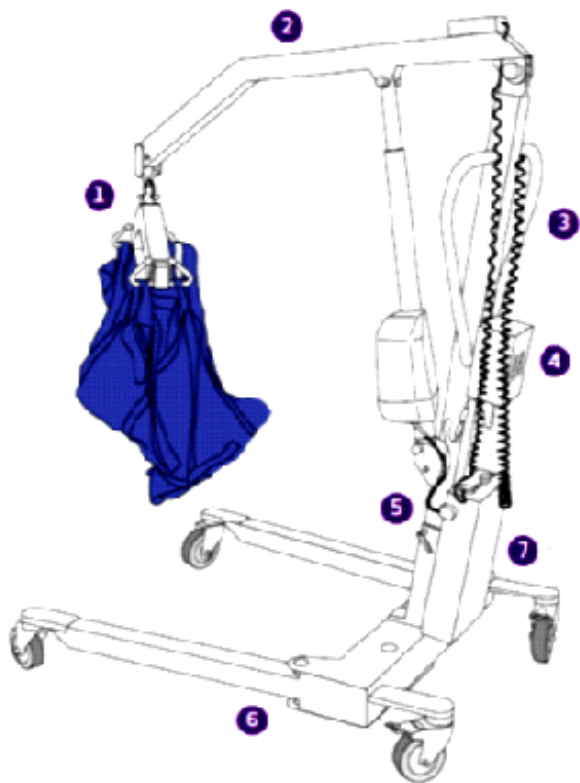

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1 Fléau | 5 Arrêt d'urgence |
| 2 Flèche | 6 Pied |
| 3 Mât | 7 Batterie |
| 4 Commandes | |

A VOTRE ECOUTE

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

Accueil par des **ergothérapeutes**
et une **secrétaire documentaliste**

cicAT des Pays
de la Loire
Conseils pour l'autonomie

CICAT DES PAYS DE LA LOIRE


1 rue des Maillets
72000 LE MANS

Téléphone : 02.44.02.40.00

E-mail : contact@cicat-pdl.fr

www.cicat-pdl.fr

L'utilisation du lève personne

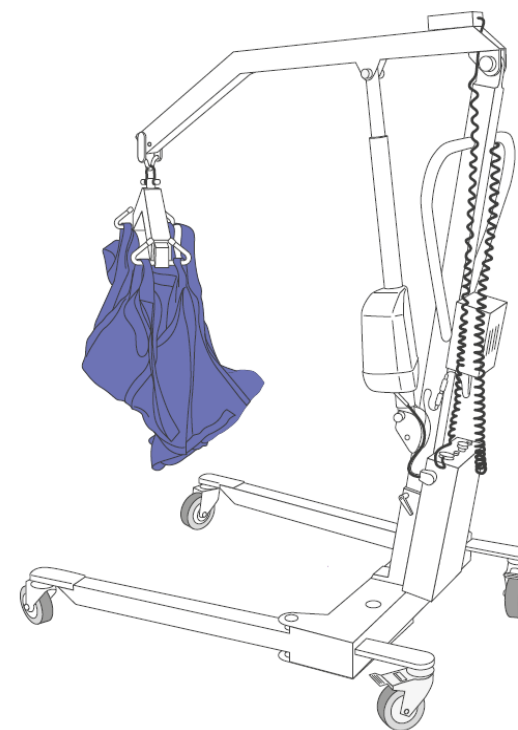

Source : *affichette ANSM*
« *Bien utiliser un lève personne* »

Différents types de sangles



Sangle universelle standard

Maintien du corps et des épaules
Pour tout type de transfert



Sangle toilette

Maintien du corps
Transfert en position assise, aux toilettes ou sur une chaise percée



Sangle hamac (ici avec tête)

Maintien du corps et de la tête
Transfert en position assise et semi-assise
Large support de jambes

Les modèles existent avec ou sans tête et dans différentes matières.

Comment choisir la sangle ?

Le revendeur est le professionnel privilégié dans ce choix.

Il dépendra :

1. De la marque du lève personne.
2. Du type de transfert
3. Des capacités de la personne
4. Du poids et de la taille
5. Du confort de la personne

Comment bien utiliser un lève personne ?

Installation de la personne

Installer la personne dans la sangle selon les recommandations du fabricant et en évitant les plis.

Approcher le lève personne.

Ecarter les pieds du lève personne.

Verrouiller les roues du fauteuil et/ou du lit avant le transfert de la personne.

Accrocher les sangles au fléau et s'assurer qu'elles soient bien fixées, se reporter aux préconisations du fabricant.

Solliciter au maximum les capacités de la personne pendant le transfert



*Après chaque transfert,
retirer la sangle de sous la personne.*

Déplacement de la personne

Garder les pieds du lève personne écartés pour une meilleure stabilité.

Vérifier l'absence d'obstacles autour de l'appareil et sur le chemin du transfert (meubles, tapis, etc.)

Principes généraux

Recommandations

Lire la notice d'utilisation fournie par le fabricant.

Vérifier le poids maximal supporté par le lève-personne et la sangle.

Vérifier la compatibilité sangle/lève-personne.

Respecter le croisement éventuel des éléments de soutien des cuisses.

En cas de dysfonctionnement, appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

Il existe en cas de panne une manette de débrayage manuel du vérin.

Ne jamais soulever un patient plus haut que l'opération ne le nécessite.

Toujours lever la sangle à la verticale.

Les choses à éviter

Attention à ne pas cogner la personne avec le fléau lors de la descente de la flèche.

Eviter les transferts de côté.

La personne doit éviter de se tenir au fléau.

Ne pas bloquer les roues du lève-personne au moment du transfert sur le fauteuil roulant.